

Istruzioni passo a passo per l'iniezione di Clexane® Safety Lock



Ti è stato prescritto **Clexane Safety Lock**. Se hai domande sul medicinale o su come praticare l'iniezione, chiedi consiglio al medico.

Prima dell'iniezione di **Clexane Safety Lock**

Controlla che la siringa non sia scaduta sull'etichetta o sulla scatola. Assicurati che la siringa non sia danneggiata e che il medicinale sia una soluzione limpida senza particelle. Non usare la siringa se è danneggiata o se il medicinale non è limpido. Usa un'altra siringa.



Lava le mani e il sito di iniezione con acqua e sapone, quindi asciuga le mani.



Siediti o sdraiati in una posizione comoda in modo da poter vedere facilmente la zona dell'addome in cui effettuerai l'iniezione. Una poltrona, una sedia reclinabile o un letto con i cuscini sono ideali.



Seleziona una zona sul lato destro o sinistro dell'addome ad almeno 5 cm dall'ombelico, verso il fianco.

Ricorda di effettuare l'iniezione alternando ogni volta il lato destro e sinistro dell'addome.



Suggerimenti per l'iniezione di **Clexane Safety Lock**

COS E DA FARE

- ✓ Somministra ogni giorno alla stessa ora, per il numero esatto di giorni indicato dal medico
- ✓ Effettua l'iniezione alternando ogni volta il lato destro e sinistro dell'addome
- ✓ Chiama immediatamente il medico se salti una dose, somministri una quantità di medicinale eccessiva o soffri di effetti collaterali
- ✓ Rivolgiti al medico ogniqualvolta hai domande o timori relativamente alla terapia o alle istruzioni per l'iniezione
- ✓ Rimuovi l'ago dal sito di iniezione prima di attivare il sistema di sicurezza


E DA NON FARE

- ✗ Attivare il sistema di sicurezza finché la siringa non è stata rimossa dalla pelle
- ✗ Effettuare l'iniezione in zone che presentano lividi o cicatrici
- ✗ Stringere troppo forte la piega nella pelle
- ✗ Sfregare il sito di iniezione quando hai finito, potresti causare lividi

L'iniezione di Clexane Safety Lock

1. Preparazione della siringa

Togli il cappuccio protettivo dall'ago. Se è presente una goccia sulla punta dell'ago, rimuovila picchiando la siringa tenuta con l'ago rivolto verso il basso. Non espellere la bolla d'aria. **Vedi più avanti sei hai necessità di modificare la dose.**[†]

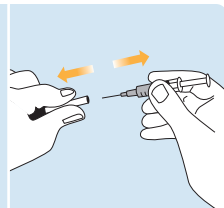


2. Preparazione della plica cutanea

Siediti o sdraiati in una posizione comoda e afferra con delicatezza una piega nella pelle con pollice e indice in corrispondenza del sito di iniezione.




3. Iniezione

Inserisci l'ago per tutta la sua lunghezza nella piega della pelle a un angolo di 90° e premi quindi lo stantuffo finché tutto il medicinale non è stato erogato. **Non lasciare la piega della pelle durante l'iniezione.**

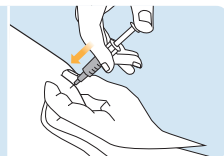

4. Rimozione della siringa

Dopo l'iniezione, rimuovi l'ago estraendolo in linea retta, tenendo il dito sullo stantuffo.

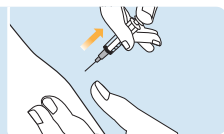


5. Attivazione del sistema di sicurezza

Tieni l'ago lontano da te e da altre persone e attiva il sistema di sicurezza premendo con fermezza lo stantuffo. Il manicotto di protezione andrà automaticamente a coprire l'ago e sentirai un "click".



6. Eliminazione

Getta la siringa usata nel contenitore per oggetti taglienti. Chiudi bene il coperchio e posiziona il contenitore fuori dalla portata dei bambini. Quando il contenitore è pieno, consegnalo al medico o all'infermiere che provvederanno all'eliminazione. Restituisci ogni farmaco inutilizzato al farmacista. **NON eliminare nei rifiuti domestici.**

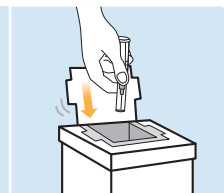

[†]REGOLAZIONE DELLA DOSE: se il medico ti ha indicato di modificare la dose di Clexane Safety Lock, dovrai espellere il medicinale in eccesso in un apposito contenitore prima dell'iniezione. Tieni la siringa con la punta dell'ago rivolta verso il basso e premi lo stantuffo fino a portare la parte inferiore della bolla d'aria allo stesso livello della tacca sulla siringa corrispondente alla dose prescritta dal medico. Se il medicinale in eccesso non è espulso prima dell'iniezione, il sistema di sicurezza non si attiverà alla fine dell'iniezione.



Per maggiori informazioni sul **Clexane Safety Lock**,
consulta il foglietto illustrativo (Consumer Medicine Information)
e visita:

www.vtematters.com.au/resources

Parola d'ordine: support

(Ricorda che la parola d'ordine distingue tra maiuscole e minuscole)

**Per Sanofi Medical Information,
chiama il numero 1800 818 806**

**In caso di domande su Clexane o sulla tua condizione,
contatta il tuo operatore sanitario.**



**Scan the QR code to watch a
video showing you how to inject
Clexane Safety Lock at home.**

Riferimenti: 1. Clexane and Clexane Forte Instructions for Use, Sanofi, 2014.

Sanofi-Aventis Australia Ptd Ltd Trading as Sanofi, ABN 31 008 558 807,
Talavera Corporate Centre, Building D, 12-24 Talavera Road, Macquarie Park,
NSW 2113. *Clexane is a registered trademark for Sanofi-Aventis.
MAT-AU-2201383. Date of preparation: March 2022. SACL24972W.

sanofi